

MUJI 無印良品

声波电动牙刷 (刷头另售) 家用型


型号 MJ-ET1

使用说明书

- 承蒙惠购本商品，在此深表感谢。
- 使用前请仔细阅读本使用说明书，以便正确使用。
- 请妥善保管好本说明书。

安全须知
各部位名称及功能
电池的安装方法
使用方法
关于牙刷 / 如果出现这种情况
使用说明书编号: TB-0002471-1
详细说明书发行日: 2017年4月
执行标准: GB4706.1-2005
GB4706.59-2008

各部位名称及功能

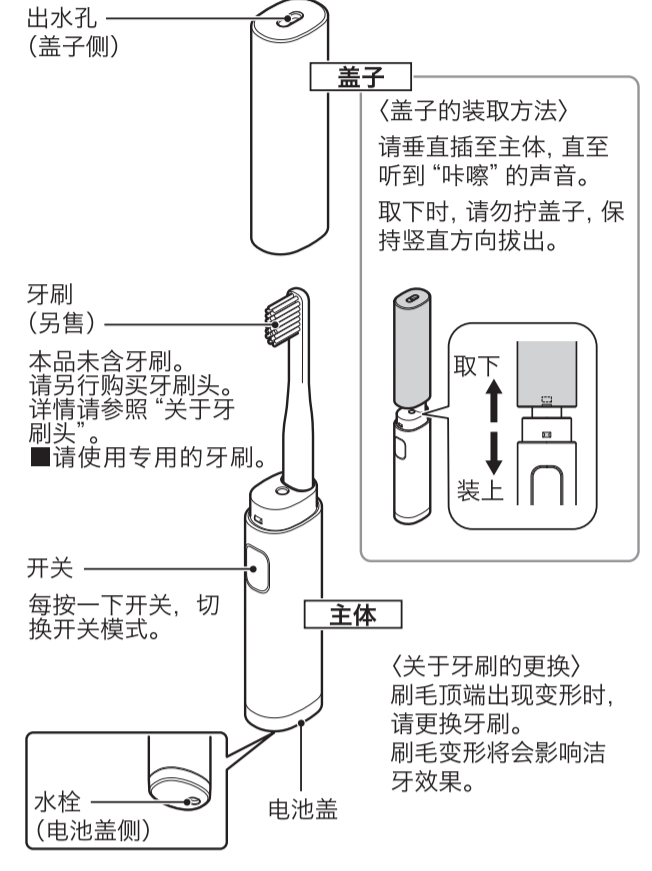

保养方法

请用少量清水稀释的清洁剂浸湿软布，拧干后擦拭污渍，然后再用干布擦拭。

(清洗牙刷)
用水清洗。
● 请勿使用40℃以上的水清洗。
● 盖子和内侧可能会有附着污渍。
● 清洗后，擦拭水分及晾干。
● 清洗后，请使用干毛巾等擦干。


(牙刷不易取出时)
■ 请确认电池盖已经盖紧。可能因出现牙膏结块而使牙刷不易取出。
● 请勿使用40℃以上的水清洗。
● 清洗后，请使用清水或温水冲洗主体2-3分钟后取出牙刷。
(移动时)
如在电动牙刷内部潮湿的状态下放入包袋内，即使盖紧盖子，也可能从出水孔流出水，而造成污渍或产品损坏。请务必擦干水分。

安全须知

- 保养时，请勿使用天那水、汽油、喷雾式清洗剂等。否则可能会导致产品变质、变色。
- 清洗主体时，请确保电池盖盖紧。如有水进入主体，可能会导致故障。
- 请勿将主体沉入水中，或是长时间放置于水中。否则可能会导致产品故障。

电池的安装方法

本品不包含电池。请另行购买7号碱性干电池(LR03)。

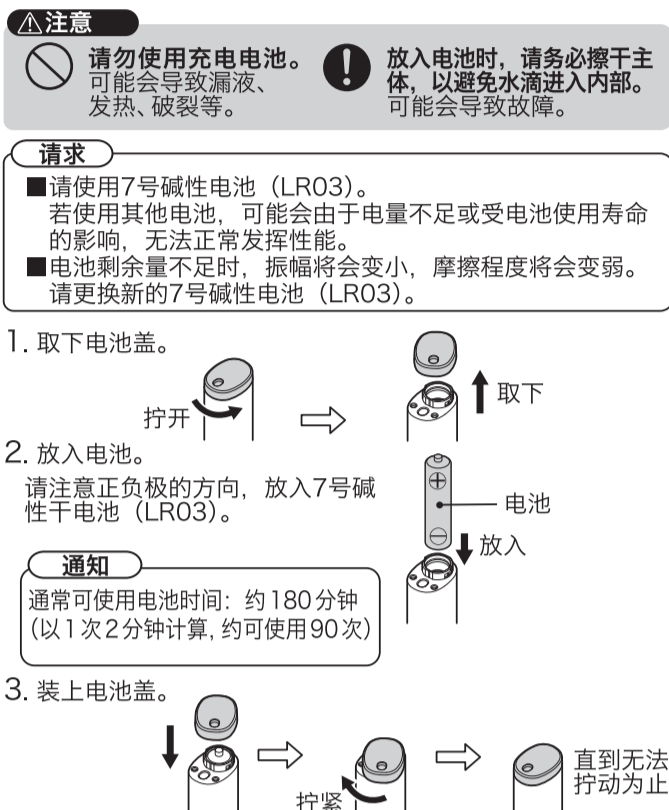

规格

电源方式	1.5V***7号碱性干电池(LR03)×1(电池另售)
牙刷的振动频率(约)	30,000次/分
充电时间(20℃时)(约)	180分钟(1次以2分钟计算，约90次)
产品尺寸(约)	长24×宽32×高202mm
产品重量(约)	70g(不含电池、牙刷)
套装内容	主体、使用说明书

★请对长期使用过的声波电动牙刷进行检查!

使用时是否出现异常情况?
● 电池出现漏液
● 电池异常发热
● 电池接口处出现锈迹

为了防止发生故障和事故，请立即停止使用并将电池取出。向购买本产品的销售店咨询。

Ⓜ 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用

Ⓜ 仅适用于非热带气候条件下安全使用

销售商
无印良品(上海)商业有限公司
注册地址: 上海市静安区南京西路1601号35楼
电话: 021-6375-6677
www.muji.com

生产商: TWINBIRD CORPORATION
地址: 2084-2 Yoshida-Nishiota, Tsubame, Niigata 959-0292, JAPAN

安全须知 请务必遵守。

产品以及使用说明书上记载了防止使用者或他人遭受危害，安全正确使用所需要的重要内容。请在充分理解下述内容(标记/图形符号)的基础上仔细阅读本文，并严格遵守所述事项。

● 标记说明

- ⚠ **警告** 表示“可能会导致死亡、重伤或财产损失”的内容。
- ⚠ **注意** 表示“可能会导致受伤或财产损失”的内容。


● 图形符号说明

- 🚫 表示不得执行的“禁止”内容。
- 🛑 表示必须执行的“强制”内容。

<关于主体>

- ⚠ **警告** 请勿放在儿童可以触及及的场所。可能因误食人可拆卸配件等导致事故或受伤。
- ⚠ **注意** 请勿使用去渍剂或美白牙膏等多含研磨剂的牙膏。否则可能会导致产品变形、变色、故障。
- ⚠ **注意** 请勿将主体沉入水中，或是长时间放置于水中。否则可能会导致产品故障。
- ⚠ **警告** 请勿置于阳光直射的场所。机动车车内以及靠近热源。否则可能会导致产品变形、变色、故障。
- ⚠ **注意** 请勿自行修理或改造。否则可能会导致受伤或故障。

使用方法 (续)

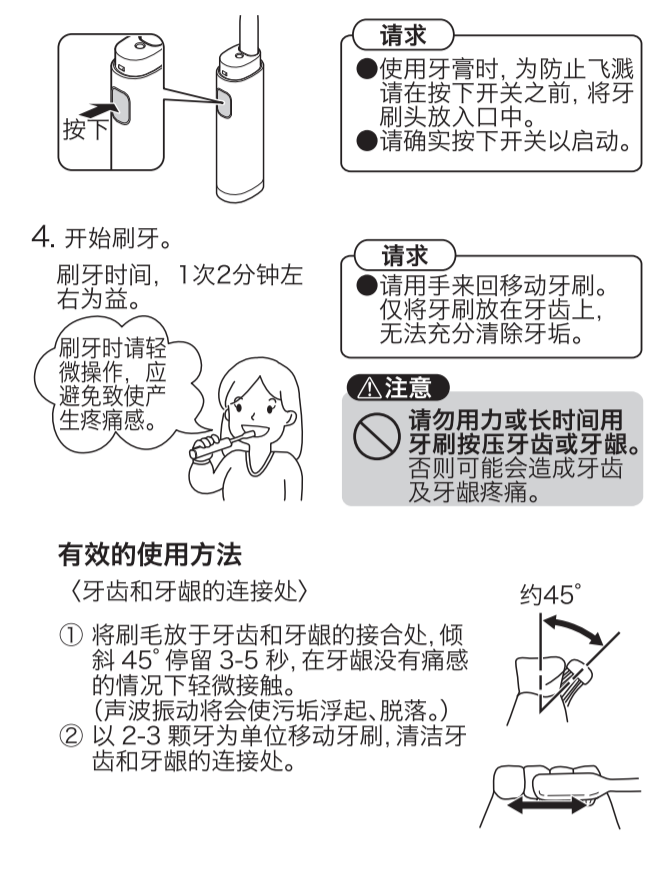

注意 (续)

- ⚠ **注意** 请避免附着凝胶、生发剂、护手霜等。否则可能会导致产品故障，或损坏外观。
- ⚠ **注意** 请勿使产品掉落或施加强烈冲击。可能会导致受伤或故障。
- ⚠ **注意** 请勿在打开开关状态下放置不管。可能会导致受伤或故障。
- ⚠ **注意** 保养时，请勿使用天那水、汽油、喷雾式清洗剂。否则可能会导致变质、变色。
- ⚠ **注意** 请勿与家人或他人共用牙刷。否则可能会导致感染。
- ⚠ **注意** 请勿用于刷牙以外的用途。否则可能会导致故障。
- ⚠ **注意** 患牙周炎时，请就医咨询后使用本品。否则可能会导致牙齿及牙龈的损伤。

注意 (续)

- ⚠ **注意** 请勿用牙刷用力或者长时间摩擦牙齿或牙龈。否则可能会伤害牙齿及牙龈。
- ⚠ **注意** 如正在进行牙齿治疗，或是植入的补牙晃动等情况下请勿使用。否则可能会伤害牙齿及牙龈。
- ⚠ **注意** 幼儿或无法自行操作的人士，口腔内感觉迟钝的人士等请勿使用。否则可能会伤害牙齿及牙龈。
- ⚠ **注意** 儿童使用时，请家长在身旁监护。否则可能会伤害牙齿及牙龈。
- ⚠ **注意** 清洗产品主体时，请确认电池盖盖紧。如果主体进水，可能会导致故障。

关于电池

警告

- ⚠ **警告** 关于碱性电池
● 请勿使其短路、拆卸、加热或是放入火内。否则可能会导致碱性电池漏液、发热、破裂。
- ⚠ **警告** 如电池的碱性溶液粘在皮肤或衣服上时，请立即用清水清洗。如溶液不慎入眼部，请立即就医治疗。否则可能会对皮肤及眼部造成伤害。

注意

请遵守以下事项。如错误使用电池，可能会导致漏液、发热、破裂等而导致故障、受伤以及污染周边物品。请务必遵守电池上标示的使用注意事项。

- ⚠ **注意** 请正确安装电池正负极。
- ⚠ **注意** 放入电池时，请务必确认正负极。避免水漏入内部。
- ⚠ **注意** 请使用有效期内内的电池。
- ⚠ **注意** 如连续2周以上不使用的电池，请取出电池。
- ⚠ **注意** 请勿直接连接电池。

MUJI 無印良品

电动牙刷 (刷头另售) 家用型


型号 MJ-ET1

使用说明书

- 承蒙惠购本商品，在此深表感谢。
- 使用前请仔细阅读本使用说明书，以便正确使用。
- 请妥善保管好本说明书。

安全须知
各部位名称及功能
电池的安装方法
使用方法
关于牙刷 / 如果出现这种情况
使用说明书编号: TB-0002471-1
详细说明书发行日: 2017年4月
执行标准: GB4706.1-2005
GB4706.59-2008

各部位的名称及功能

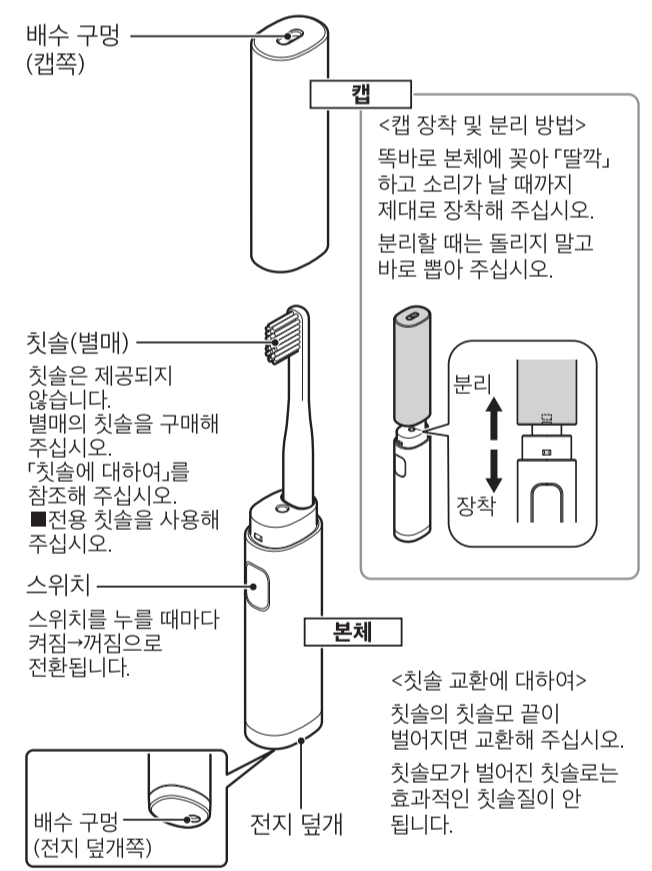

保养方法

请用少量清水稀释的清洁剂浸湿软布，拧干后擦拭污渍，然后再用干布擦拭。

(清洗牙刷)
用水清洗。
● 请勿使用40℃以上的水清洗。
● 盖子和内侧可能会有附着污渍。
● 清洗后，擦拭水分及晾干。
● 清洗后，请使用干毛巾等擦干。


(牙刷不易取出时)
■ 请确认电池盖已经盖紧。可能因出现牙膏结块而使牙刷不易取出。
● 请勿使用40℃以上的水清洗。
● 清洗后，请使用清水或温水冲洗主体2-3分钟后取出牙刷。
(移动时)
如在电动牙刷内部潮湿的状态下放入包袋内，即使盖紧盖子，也可能从出水孔流出水，而造成污渍或产品损坏。请务必擦干水分。

安全须知

- 保养时，请勿使用天那水、汽油、喷雾式清洗剂等。否则可能会导致产品变质、变色。
- 清洗主体时，请确保电池盖盖紧。如有水进入主体，可能会导致故障。
- 请勿将主体沉入水中，或是长时间放置于水中。否则可能会导致产品故障。

电池的安装方法

本品不包含电池。请另行购买7号碱性干电池(LR03)。

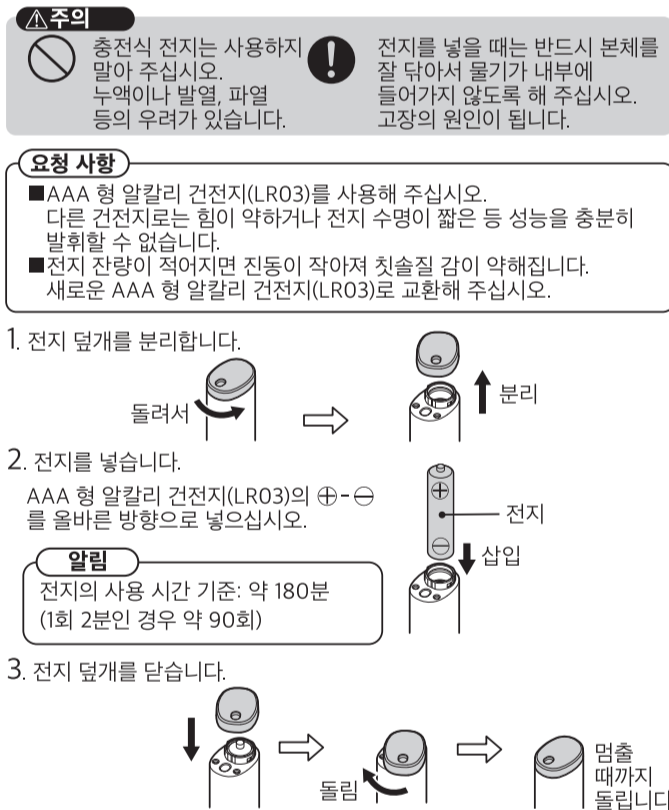

规格

电源方式	1.5V***7号碱性干电池(LR03)×1(电池另售)
牙刷的振动频率(约)	30,000次/分
充电时间(20℃时)(约)	180分钟(1次以2分钟计算，约90次)
产品尺寸(约)	长24×宽32×高202mm
产品重量(约)	70g(不含电池、牙刷)
套装内容	主体、使用说明书

★请对长期使用过的声波电动牙刷进行检查!

使用时是否出现异常情况?
● 电池出现漏液
● 电池异常发热
● 电池接口处出现锈迹

为了防止发生故障和事故，请立即停止使用并将电池取出。向购买本产品的销售店咨询。

Ⓜ 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用

Ⓜ 仅适用于非热带气候条件下安全使用

销售商
无印良品(上海)商业有限公司
注册地址: 上海市静安区南京西路1601号35楼
电话: 021-6375-6677
www.muji.com

生产商: TWINBIRD CORPORATION
地址: 2084-2 Yoshida-Nishiota, Tsubame, Niigata 959-0292, JAPAN

安全须知 请务必遵守。

产品以及使用说明书上记载了防止使用者或他人遭受危害，安全正确使用所需要的重要内容。请在充分理解下述内容(标记/图形符号)的基础上仔细阅读本文，并严格遵守所述事项。

● 标记说明

- ⚠ **警告** 表示“可能会导致死亡、重伤或财产损失”的内容。
- ⚠ **注意** 表示“可能会导致受伤或财产损失”的内容。


● 图形符号说明

- 🚫 表示不得执行的“禁止”内容。
- 🛑 表示必须执行的“强制”内容。

<关于主体>

- ⚠ **警告** 请勿放在儿童可以触及及的场所。可能因误食人可拆卸配件等导致事故或受伤。
- ⚠ **注意** 请勿使用去渍剂或美白牙膏等多含研磨剂的牙膏。否则可能会导致产品变形、变色、故障。
- ⚠ **注意** 请勿将主体沉入水中，或是长时间放置于水中。否则可能会导致产品故障。
- ⚠ **警告** 请勿置于阳光直射的场所。机动车车内以及靠近热源。否则可能会导致产品变形、变色、故障。
- ⚠ **注意** 请勿自行修理或改造。否则可能会导致受伤或故障。

使用方法 (续)

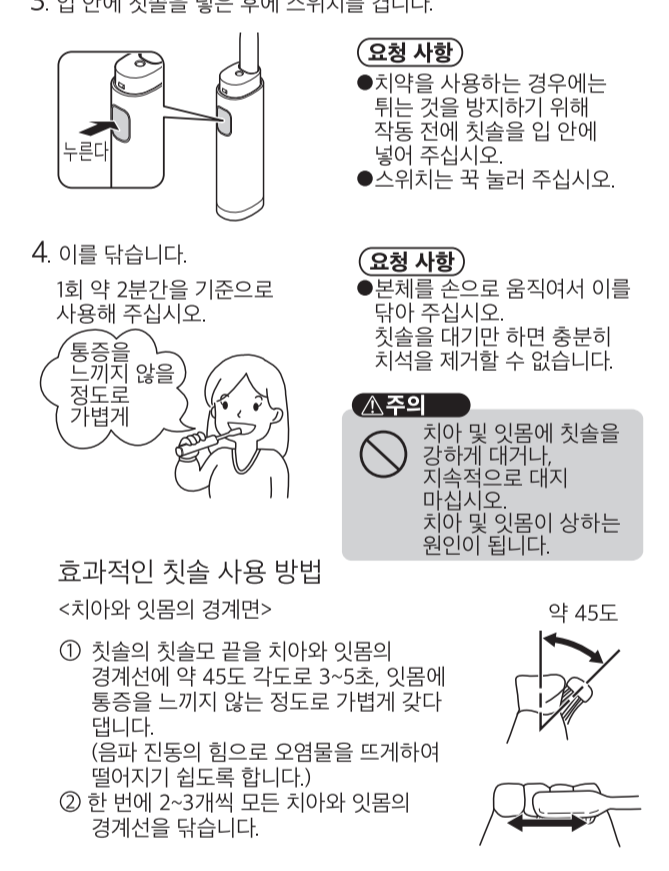

注意 (续)

- ⚠ **注意** 请避免附着凝胶、生发剂、护手霜等。否则可能会导致产品故障，或损坏外观。
- ⚠ **注意** 请勿使产品掉落或施加强烈冲击。可能会导致受伤或故障。
- ⚠ **注意** 请勿在打开开关状态下放置不管。可能会导致受伤或故障。
- ⚠ **注意** 保养时，请勿使用天那水、汽油、喷雾式清洗剂。否则可能会导致变质、变色。
- ⚠ **注意** 请勿与家人或他人共用牙刷。否则可能会导致感染。
- ⚠ **注意** 请勿用于刷牙以外的用途。否则可能会导致故障。
- ⚠ **注意** 患牙周炎时，请就医咨询后使用本品。否则可能会导致牙齿及牙龈的损伤。

注意 (续)

- ⚠ **注意** 请勿用牙刷用力或者长时间摩擦牙齿或牙龈。否则可能会伤害牙齿及牙龈。
- ⚠ **注意** 如正在进行牙齿治疗，或是植入的补牙晃动等情况下请勿使用。否则可能会伤害牙齿及牙龈。
- ⚠ **注意** 幼儿或无法自行操作的人士，口腔内感觉迟钝的人士等请勿使用。否则可能会伤害牙齿及牙龈。
- ⚠ **注意** 儿童使用时，请家长在身旁监护。否则可能会伤害牙齿及牙龈。
- ⚠ **注意** 清洗产品主体时，请确认电池盖盖紧。如果主体进水，可能会导致故障。

关于电池

警告

- ⚠ **警告** 关于碱性电池
● 请勿使其短路、拆卸、加热或是放入火内。否则可能会导致碱性电池漏液、发热、破裂。
- ⚠ **警告** 如电池的碱性溶液粘在皮肤或衣服上时，请立即用清水清洗。如溶液不慎入眼部，请立即就医治疗。否则可能会对皮肤及眼部造成伤害。

注意

请遵守以下事项。如错误使用电池，可能会导致漏液、发热、破裂等而导致故障、受伤以及污染周边物品。请务必遵守电池上标示的使用注意事项。

- ⚠ **注意** 请正确安装电池正负极。
- ⚠ **注意** 放入电池时，请务必确认正负极。避免水漏入内部。
- ⚠ **注意** 请使用有效期内内的电池。
- ⚠ **注意** 如连续2周以上不使用的电池，请取出电池。
- ⚠ **注意** 请勿直接连接电池。

MUJI 無印良品

电动牙刷 (刷头另售) 家用型

型号 MJ-ET1

使用说明书

- 承蒙惠购本商品，在此深表感谢。
- 使用前请仔细阅读本使用说明书，以便正确使用。
- 请妥善保管好本说明书。

安全须知
各部位名称及功能
电池的安装方法
使用方法
关于牙刷 / 如果出现这种情况
使用说明书编号: TB-0002471-1
详细说明书发行日: 2017年4月
执行标准: GB4706.1-2005
GB4706.59-2008

各部位的名称及功能



保养方法

请用少量清水稀释的清洁剂浸湿软布，拧干后擦拭污渍，然后再用干布擦拭。

(清洗牙刷)
用水清洗。
● 请勿使用40℃以上的水清洗。
● 盖子和内侧可能会有附着污渍。
● 清洗后，擦拭水分及晾干。
● 清洗后，请使用干毛巾等擦干。

(牙刷不易取出时)
■ 请确认电池盖已经盖紧。可能因出现牙膏结块而使牙刷不易取出。
● 请勿使用40℃以上的水清洗。
● 清洗后，请使用清水或温水冲洗主体2-3分钟后取出牙刷。
(移动时)
如在电动牙刷内部潮湿的状态下放入包袋内，即使盖紧盖子，也可能从出水孔流出水，而造成污渍或产品损坏。请务必擦干水分。

安全须知

- 保养时，请勿使用天那水、汽油、喷雾式清洗剂等。否则可能会导致产品变质、变色。
- 清洗主体时，请确保电池盖盖紧。如有水进入主体，可能会导致故障。
- 请勿将主体沉入水中，或是长时间放置于水中。否则可能会导致产品故障。

电池的安装方法

本品不包含电池。请另行购买7号碱性干电池(LR03)。



规格

电源方式	1.5V***7号碱性干电池(LR03)×1(电池另售)
牙刷的振动频率(约)	30,000次/分
充电时间(20℃时)(约)	180分钟(1次以2分钟计算，约90次)
产品尺寸(约)	长24×宽32×高202mm
产品重量(约)	70g(不含电池、牙刷)
套装内容	主体、使用说明书

★请对长期使用过的声波电动牙刷进行检查!

使用时是否出现异常情况?
● 电池出现漏液
● 电池异常发热
● 电池接口处出现锈迹

为了防止发生故障和事故，请立即停止使用并将电池取出。向购买本产品的销售店咨询。

Ⓜ 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用

Ⓜ 仅适用于非热带气候条件下安全使用

销售商
无印良品(上海)商业有限公司
注册地址: 上海市静安区南京西路1601号35楼
电话: 021-6375-6677
www.muji.com

生产商: TWINBIRD CORPORATION
地址: 2084-2 Yoshida-Nishiota, Tsubame, Niigata 959-0292, JAPAN

安全须知 请务必遵守。

产品以及使用说明书上记载了防止使用者或他人遭受危害，安全正确使用所需要的重要内容。请在充分理解下述内容(标记/图形符号)的基础上仔细阅读本文，并严格遵守所述事项。

● 标记说明

- ⚠ **警告** 表示“可能会导致死亡、重伤或财产损失”的内容。
- ⚠ **注意** 表示“可能会导致受伤或财产损失”的内容。

● 图形符号说明

- 🚫 表示不得执行的“禁止”内容。
- 🛑 表示必须执行的“强制”内容。

<关于主体>

- ⚠ **警告** 请勿放在儿童可以触及及的场所。可能因误食人可拆卸配件等导致事故或受伤。
- ⚠ **注意** 请勿使用去渍剂或美白牙膏等多含研磨剂的牙膏。否则可能会导致产品变形、变色、故障。
- ⚠ **注意** 请勿将主体沉入水中，或是长时间放置于水中。否则可能会导致产品故障。
- ⚠ **警告** 请勿置于阳光直射的场所。机动车车内以及靠近热源。否则可能会导致产品变形、变色、故障。
- ⚠ **注意** 请勿自行修理或改造。否则可能会导致受伤或故障。

使用方法 (续)



注意 (续)

- ⚠ **注意** 请避免附着凝胶、生发剂、护手霜等。否则可能会导致产品故障，或损坏外观。
- ⚠ **注意** 请勿使产品掉落或施加强烈冲击。可能会导致受伤或故障。
- ⚠ **注意** 请勿在打开开关状态下放置不管。可能会导致受伤或故障。
- ⚠ **注意** 保养时，请勿使用天那水、汽油、喷雾式清洗剂。否则可能会导致变质、变色。
- ⚠ **注意** 请勿与家人或他人共用牙刷。否则可能会导致感染。
- ⚠ **注意** 请勿用于刷牙以外的用途。否则可能会导致故障。
- ⚠ **注意** 患牙周炎时，请就医咨询后使用本品。否则可能会导致牙齿及牙龈的损伤。

注意 (续)

- ⚠ **注意** 请勿用牙刷用力或者长时间摩擦牙齿或牙龈。否则可能会伤害牙齿及牙龈。
- ⚠ **注意** 如正在进行牙齿治疗，或是植入的补牙晃动等情况下请勿使用。否则可能会伤害牙齿及牙龈。
- ⚠ **注意** 幼儿或无法自行操作的人士，口腔内感觉迟钝的人士等请勿使用。否则可能会伤害牙齿及牙龈。
- ⚠ **注意** 儿童使用时，请家长在身旁监护。否则可能会伤害牙齿及牙龈。
- ⚠ **注意** 清洗产品主体时，请确认电池盖盖紧。如果主体进水，可能会导致故障。

关于电池

警告

- ⚠ **警告** 关于碱性电池
● 请勿使其短路、拆卸、加热或是放入火内。否则可能会导致碱性电池漏液、发热、破裂。
- ⚠ **警告** 如电池的碱性溶液粘在皮肤或衣服上时，请立即用清水清洗。如溶液不慎入眼部，请立即就医治疗。否则可能会对皮肤及眼部造成伤害。

注意

请遵守以下事项。如错误使用电池，可能会导致漏液、发热、破裂等而导致故障、受伤以及污染周边物品。请务必遵守电池上标示的使用注意事项。

- ⚠ **注意** 请正确安装电池正负极。
- ⚠ **注意** 放入电池时，请务必确认正负极。避免水漏入内部。
- ⚠ **注意** 请使用有效期内内的电池。
- ⚠ **注意** 如连续2周以上不使用的电池，请取出电池。
- ⚠ **注意** 请勿直接连接电池。